

# PRO-Clean™

## Обнаружение остаточного содержания белка

**PRO-Clean** – простой и быстрый способ контроля чистоты поверхностей, в основе которого лежит обнаружение остаточного содержания белка после санитарной обработки. Просто проведите тампоном по поверхности, выдавите реагент, и если в пробе присутствует остаточный белок, реагент изменит цвет на фиолетовый. Чем выше содержание белка, тем быстрее жидкая среда пробирки станет фиолетовой и тем насыщеннее будет сам цвет. PRO-Clean позволяет быстро установить гигиеничность поверхности для принятия, при необходимости, немедленных корректирующих мер.

### Преимущества:


- Результаты через 1-10 минут
- Легкость интерпретации результатов благодаря четкой цветовой индикации – не требуется дополнительного оборудования
- Уникальный жидкий стабильный реагент позволяет получить надежные результаты
- Предувлажненный тампон позволяет сохранить чистоту пробы для получения достоверных результатов
- Экологически безопасный (полностью перерабатываемый прибор)
- Срок годности – 18 месяцев при низкой или комнатной температурах (2-25 °C)

### Чувствительность:

- Определяет содержание 80 мкг белка через 1 мин.
- Определяет содержание 50 мкг белка через 5 мин.
- Определяет содержание 20 мкг белка через 10 мин.
- По истечении 10 мин. любые изменения цвета не являются индикаторными.



## Инструкция по применению теста PRO-Clean:

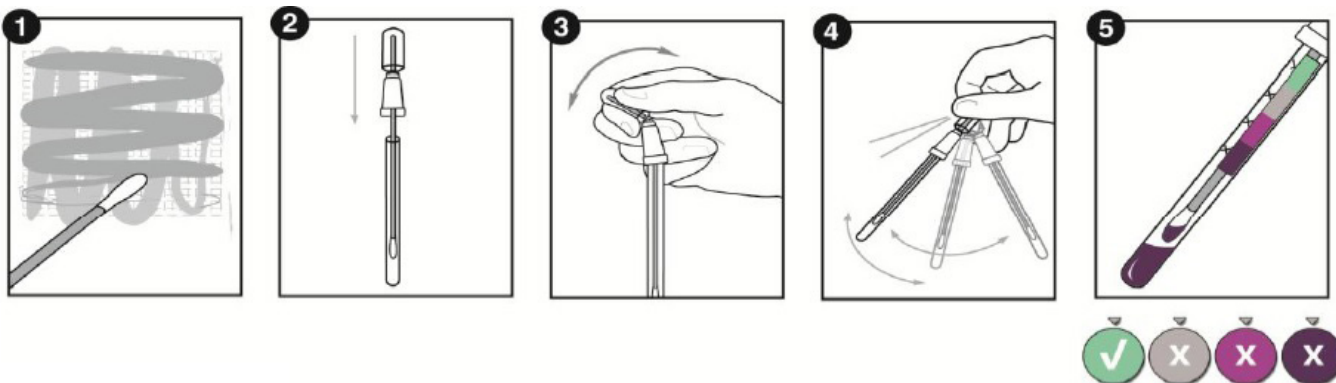

### Сопутствующие продукты:

#### EnSURE

EnSURE – высокочувствительный люминометр, позволяющий анализировать результаты целого ряда тестов: на АТФ, общее количество жизнеспособных микроорганизмов, колиформные бактерии, E. Coli и др. Система мониторинга включает ПО SureTrend для управления полученными данными.



#### UltraSnap и AquaSnap

UltraSnap и AquaSnap измеряют содержание АТФ на поверхностях и в жидкостях соответственно. АТФ содержится во всех органических веществах в живых организмах. После процедур очистки его количество должно существенно сокращаться. Мониторинг АТФ позволяет быстро и объективно оценить эффективность уборки.



#### AllerSnap

AllerSnap – индикаторный тест на определение остаточного содержания белка для мониторинга широкого спектра аллергенов. Результаты готовы через 15-30 минут. AllerSnap определяет содержание белка до 3 мкг.



#### SpotCheck Plus

SpotCheck Plus – индикаторный тест для определения уровня гигиены, не требующий какого-либо дополнительного оборудования и предоставляющий результаты уже через 60 секунд. Определяет остаточное содержание глюкозы и лактозы.

|                                                                         | Количество | № заказа       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Портативная мини-лаборатория EnSURE, ПО SureTrend, вкл. поверку         | 1          | EnSURE П       |
| UltraSnap АТФ-тест для поверхностей                                     | 100        | US2020         |
| AquaSnap Free АТФ-тест для жидкостей                                    | 100        | AQ100F         |
| AquaSnap Total АТФ-тест для жидкостей                                   | 100        | AQ100          |
| AllerSnap (тест на белки-аллергены)                                     | 100        | ALS-100        |
| SpotCheck Plus (остаточное содержание на поверхности глюкозы и лактозы) | 100        | GL-100         |
| <b>PRO-Clean Индикаторный тест для поверхностей на остаточный белок</b> | <b>100</b> | <b>PRO-100</b> |

Российское отделение Testo AG – ООО “Тэсто Рус”  
115054, Москва,  
Большой Строченовский пер., д.23В, стр.1  
Телефон: +7 (495) 221-62-13  
Факс: +7 (495) 221-62-16  
E-mail: info@testo.ru  
http://www.testo.ru